

はじめに このガイドでできること

YYProbeアプリとAiLENSをつなぐと、
話した内容をAiLENSの画面に文字として
表示できます。



話したことが
文字で見える！

今日は
いい天気ですね

初回
だけ！

初回だけやること

AiLENSをYYSystem用にするための準備と、
YYProbeアプリとAiLENSをはじめてつなぎます。




①AiLENS を
YYSystem 用にする

②YYProbeアプリと
AiLENSをはじめてつなぐ

毎回
使う！

2回目からやること

AiLENSを先に起動してから、YYProbeアプリを開きます。
自動でつながるまで、少し待ちます。
※この順番がおすすめです。

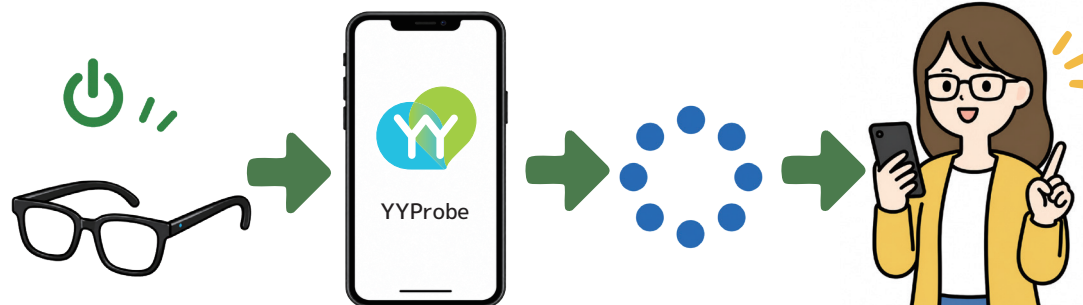

①AiLENS の
電源を入れる

②YYProbe を
開く

③自動でつながる
のを待つ

④文字がAiLENSに
表示されたらOK



一度つながれば、次からはとてもかんたん！
くわしい手順は、次のページから説明します。

ご利用ガイド版数：第 1 版

YYProbe アプリバージョン：Ver9.6.3 以上

まず、ガイドの流れと用意するもの

青は初回だけの設定、緑は 2 回目以降の使い方です。



このガイドの流れ

まず
確認

はじめに確認すること

- P.3 AiLENS本体のボタンを知る
- P.4 AiLENSの電源操作と画面表示
- P.5 iPhoneのBluetoothをオンにする

初回
だけ！

初回だけの設定

はじめて使うときに行う設定です。

- P.6-7 AiLENSをYYSystem用にアップデートする
- P.8 YYProbeアプリでAiLENS接続をオンにする
- P.9 AiLENSをスキャンして接続する

毎回
使う！

2回目以降の使い方

一度つながれば、毎回はこちらです。

- P.10 2 回目以降の使い方（自動再接続）
- P.11 AiLENSとiPhone マイクの切り替え
- P.12 AiLENSの設定画面

困った
とき

困ったとき

- P.13 困ったとき（AiLENSが検出されない）
- P.14 困ったとき（AiLENSと接続できない）
- P.15 困ったとき（AiLENSに文字が表示されない）

用意するもの

①

iPhone



②

YYProbe
アプリ

③

AiLENS



④

AiLENS
UPGRADEアプリ

⑤

インターネット
接続

⑥

Bluetoothが
使える状態

AiLENSは充電しておくともスムーズに使えます。
充電ケーブル（USB Type-C）も用意しておきましょう！



ご利用には市販の AR グラス AiLENS（販売先：SB C&S）を各ユーザー様にてご購入ください。本体の保証・修理・サポートは、デバイスの販売元が定める範囲での対応となります。

🕒 AiLENS 本体のボタンを知る

AiLENS には、主に使う場所が 3 つあります。

どこをさわるか
先に確認
しましょう！



電源オン

電源ボタンを 5 秒間長押しする

電源オフ

1. 電源ボタンを 5 秒間長押しする
2. 表示画面に以下のメッセージが表示される
「スライドしてシャットダウンします」
「タッチバーをダブルタップでキャンセル」
3. タッチバーを指で前方向へスライドする



(右側フレームの横にあります)

① タッチバー

長押ししたり、
スライドしたりして使います



(右側フレームの下にあります)

② 充電ポート

付属の充電コネクタを接続し、
USB Type-C で充電します

③ 電源ボタン

電源のオン / オフや表示の
消去 / 再表示に使用します



覚えて

おくと安心！

- ① タッチバー：長押しやスライドで、確認や操作をします
- ② 充電ポート：充電がないときは、USB Type-C ケーブルで充電しましょう
- ③ 電源ボタン：5 秒長押しで電源のオン / オフができます

充電のポイント

- ・ 充電をすると、自動で電源入ります
- ・ 充電が完了すると、ライトが緑色に変わります
- ・ 充電後は、必ず電源をオフにしましょう
- ・ オフにしないと、電池が減ってしまいます



はじめて使うときは、まず充電をしておきましょう。バッテリー残量が少ないと、うまく動かないことがあります。

電源を入れる

- ① AiLENS 右側の電源ボタンを確認する



右側フレームの下にあります

- ② 電源ボタンを
5 秒間 長押しする

5 秒間 長押し



- ③ AiLENS の画面に
文字が出たら OK です



文字が出たら
起動して
います！



まずは電源を
入れて、
画面に文字が
出ることを
確認しましょう！




電源を切る

- ① 電源ボタンを
5 秒間 長押しする

5 秒間 長押し



- ② AiLENS の画面に以下の
メッセージが表示される

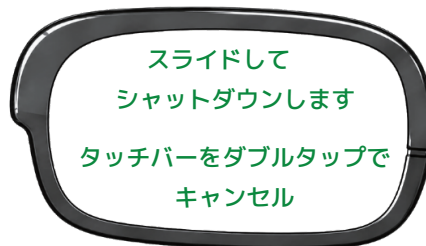

- ③ タッチバーを指で
前方向へスライドする



AiLENS の画面表示を消す / 再表示

文字やオノマトペなどの表示を消したいとき
→電源ボタンを 2 回タップ

再表示したいとき

→電源ボタンを 1 回タップ

うまく起動しないときは…

- ・ バッテリーが少ない可能性があります。
充電してから
もう一度お試しください。
- ・ 電源ボタンをしっかり
5 秒間長押ししてください。





iPhone の Bluetooth をオンにする

iPhone と AiLENS をつなぐために、Bluetooth をオンにします。

Bluetooth は
iPhone と AiLENS を
つなぐために
必要です！



① 設定アプリ
を開く



② 「Bluetooth」を
タップする



③ Bluetooth が
オン（緑色）か確認する



緑なら
OK！



コントロールセンターからもオンにできます

画面の右上から下にスワイプして
コントロールセンターからもオンにできます。

※機種によって操作が少し異なります。



Bluetooth が
オフのままだと、
AiLENS が見つからず、
つながりません。

必ずオンにしておきましょう。



Bluetooth をオンにしたら、次のページで AiLENS を YYSsystem 用にアップデートしましょう！



🕒 AiLENS を YYSystem 用にする

買ったばかりの AiLENS は、そのままでは YYProbe と接続出来ません。


AiLENS UPGRADE アプリで YYSystem 用にアップデートします。

この設定は
はじめて使うときに
1 回だけ行います。



設定手順 1/2 (アップデートの準備)


- ① App Store を
開く

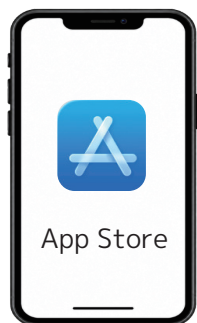

- ② 「AiLENS Update」
を検索する



- ③ 「AiLENS Update」
をインストールする

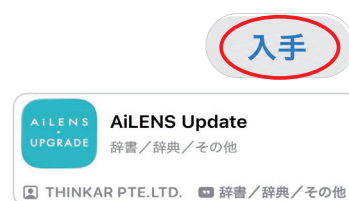

- ④ 「AiLENS Update」
アプリを開く



- ⑤ Bluetooth の確認で
「許可」をタップする



- ⑥ 「AiLENS」の
電源を入れる



電源ボタン
5 秒間長押し

- ⑦ 「今すぐ開始」を
タップする



- ⑧ 「デバイスを追加」
をタップする



電源が入っている周囲の
AiLENS をスキャンします

- ⑨ デバイスを検索中



- ⑩ 「接続」
をタップする



アップデートする前に
確認しましょう



電池残量が**50%以上**あることを確認してください。足りない場合は、先に充電してから行いましょう。
アップデートには**10～20分**ほどかかります。完了するまで、端末とAiLENSは近くに置いてください。
アップデート中は、**端末の操作は控えてください**。別のアプリを開くと上手く進まない場合があります。

🕒 AiLENS を YYSystem 用にする

買ったばかりの AiLENS は、そのままでは YYProbe と接続出来ません。

AiLENS UPGRADE アプリで YYSystem 用にアップデートします。

この設定は
はじめて使うときに
1 回だけ行います。



設定手順 2/2 (アップデートを完了する)

⑪

AiLENS の画面に
「タッチバーを長押しして確認」
と表示される



⑫

フレーム右側の側面にある
「タッチバー」を長押しする



⑬

iPhone の端末に
ペアリング画面が表示されたら
>「ペアリング」をタップする

Bluetooth ペアリングの要求

“AiLens 08AB” がお使いの iPhone へのペアリングを求めています。“AiLens 08AB” にコード “065646” が表示されていることを確認してください。このコードはアクセサリに入力しないでください。

キャンセル

ペアリング

⑭

通知の確認画面で
>「許可」をタップする

AiLens 08AB が iPhone の通知を受信することを許可しますか？

接続しているとき、iPhone で受信するすべての通知は、AiLens 08AB にも送信され、画面に表示される可能性があります。

許可しない

許可

⑮

確認コードに「AISIN」と
入力し「次へ」をタップする

確認コードを入力

66 96%

2/3


AISIN

※確認コードは
半角英字の大文字で入力

⑯ 「アップデート」を
タップする



⑰ 表示が 100% になったら
完了です

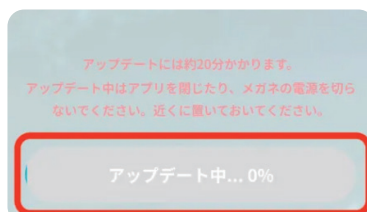

アップデート
完了後

⑱ AiLENS UPGRADE アプリ
を終了する

※開いているアプリ一覧で、
アプリを上にはスワイプします



⑲ AiLENS の
[Bluetooth ペアリング] を
解除する

YYProbe アプリで接続するため
一度 Bluetooth の登録を解除します



解除方法は P13 参照



この作業は、AiLENS を YYSystem 用にするための初回準備です。
一度できれば、毎回行う必要はありません。



YYProbe アプリで AiLENS 接続をオンにする

YYProbe アプリの設定で、AiLENS を使えるようにします。

■ YYProbe アプリの接続機能を有効にする

- ① AiLENS の電源を入れる



- ② YYProbe アプリを開く




- ③ Bluetooth の許可画面が表示された場合は「許可」をタップする



- ④ 画面右下の「設定」をタップする



- ⑤ 画面右上の「詳細設定」をタップする

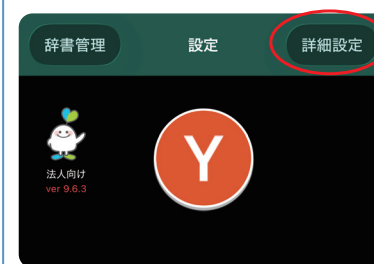

■ AiLENS 接続の設定を開く


- ⑥ 「AiLENS との接続」をオンにする



- ⑦ 画面左下の「会議」をタップする



- ⑧ 「会議を始める」をタップする

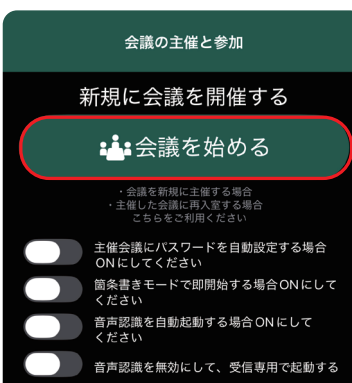

- ⑨ 「○○」メガネのマークをタップする



接続できないときは？

AiLENS を再起動してください。

iPhone の Bluetooth がオンになっているか確認してください。

1. 「設定」アプリを開く
2. 「アプリ」をタップ
3. 「YYProbe」をタップ
4. Bluetooth がオンか確認する

YYProbe のアプリが最新バージョンか確認してください。(P.15 参照)

ここまできたら、次は「AiLENS をスキャンして接続する」に進みましょう！




AiLENS をスキャンして接続する

YYProbe アプリで、AiLENS のスキャンをして接続しましょう



■ AiLENS のスキャンを開始する ■ AiLENS のペアリングを行う


- ① 「スキャン」をタップする
※ 電源が入っている
近くの AiLENS を検出します。

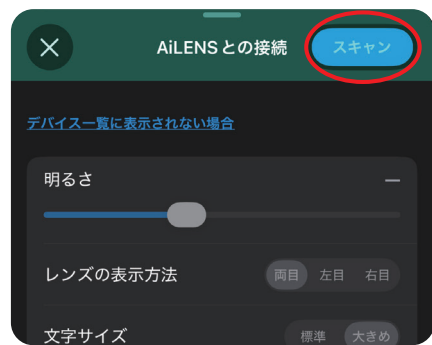

- ② スキャンして検出された
AiLENS が表示されるので
タップする



- ③
ペアリング中と表示される

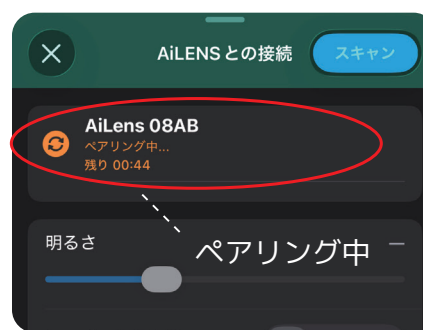

接続できないときは…



• AiLENS を再起動してください。



• iPhone の Bluetooth がオンになっているか確認してください。

1. 「設定」アプリを開く
2. 「アプリ」をタップ
3. 「YYProbe」をタップ
4. Bluetooth がオンか確認する




• YYProbe のアプリが
最新バージョンか確認してください。
(P.15 参照)



• うまくいかない場合は
Bluetooth のペアリングを解除して
再度スキャンしてください。(P.13 参照)

■ AiLENS 側の操作

- ④
AiLENS の画面に
「タッチバーを長押しして確認」
と表示される

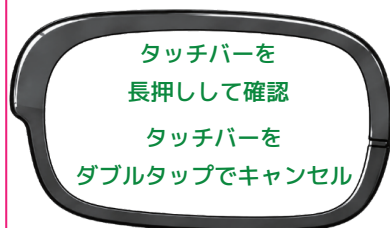

- ⑤
フレーム右側の側面にある
「タッチバー」を長押しする



■ YYProbe アプリのペアリングを有効にする

- ⑥
YYProbe アプリの端末側 に
「Bluetooth ペアリングの要求」
> 「ペアリング」をタップする



- ⑦
「AiLENS が iPhone の通知を
受信することを許可しますか？」
> 「許可」をタップする



- ⑧ 「接続済み」に
変われば OK です

※音声認識を行うと、文字が
AiLENS 側に表示されます。



接続できたら、次は「2 回目以降の使い方」に進みましょう！



毎回
使う！

2 回目以降の使い方（自動再接続）

AiLENS を先に起動してから、YYProbe アプリを開きます。
自動でつながるまで、少し待ちます。※この順番がおすすめです。

おすすめの使い方

- ① AiLENS を
先に起動する
AiLENS の電源を入れます。



- ② YYProbe
アプリを開く



- ③
自動でつながるまで待つ
接続されるまで、少し待ちます。



- ④
AiLENS が接続されると
接続中の画面が表示されます。



- ⑤ マイクのボタンで
音声認識を開始する
認識中はボタンが赤色になります。
→ AiLENS に
文字が表示されたら OK



YY レセプションアプリを先に起動した場合

自動接続は 3 分間有効です。
3 分を過ぎた場合は、下記の手順で再接続してください。



スムーズに接続するため、
AiLENS の電源を先にオンにすることを
おすすめします。




再接続手順

- ① 「○○」メガネのマーク
をタップする



- ②
「前回接続デバイス タップで
再接続を実施します」
をタップする

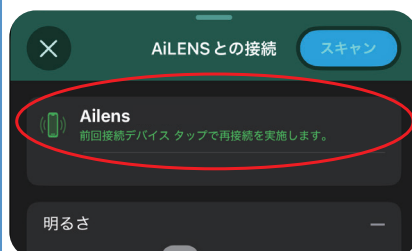

- ③ 「接続済み」に
変われば OK です

※音声認識を行うと、文字が
AiLENS 側に表示されます。



接続できないときは…

- AiLENS を先に起動してから
30 秒ほど待っても
自動でつながらない場合は
再接続の手順をお試しください。
- iPhone の Bluetooth がオンに
なっているか確認してください。
- Bluetooth のペアリングを解除して
再度接続してください。
(P.13 参照)





iPhone マイク

iPhone の近くで
話すときにおすすめ

使い分けの
イメージ



AiLENS マイク

AiLENS の近くで
話すときにおすすめ


音声認識に使うマイクを選びます

切り替えできないときは…

YY 文字起こしアプリの設定で
「Bluetooth マイク」がオンになっているか
確認してください。

(確認手順)

1. 画面左下の「設定」をタップ
2. 「さらに詳しく設定」をタップ
3. 「Bluetooth マイク利用」がオンになっているか確認

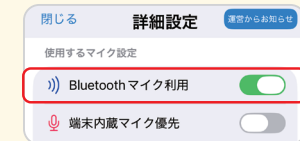

マイクの切り替え方法

どちらかの方法でマイクを切り替えます

方法 1

- ① AiLENS 接続中の画面で
マイク名をタップする



または

方法 2

- ① 画面左下の
マイク名をタップする



② 使いたいマイクを選択する



- ・ 端末内蔵マイクを優先
→ iPhone マイクを使います
- ・ 外部マイクを優先
→ 接続中の外部マイクを使います
(外部マイクがない場合は、
iPhone マイクになります)
- ・ AiLENS マイク
→ AiLENS マイクを使います

③ 画面左下のマイク名が
変わっていれば OK です

- ・ iPhone マイク
- ・ 外部マイク名
- ・ AiLENS ○○○○
(端末番号 下 4 桁)

AiLENS の設定を確認しましょう


① 設定画面を開く

どちらかの方法で設定画面を開きます。

AiLENS 接続中の画面で
「設定を開く」をタップする「」メガネのマーク
をタップする

または

② 設定画面でできること

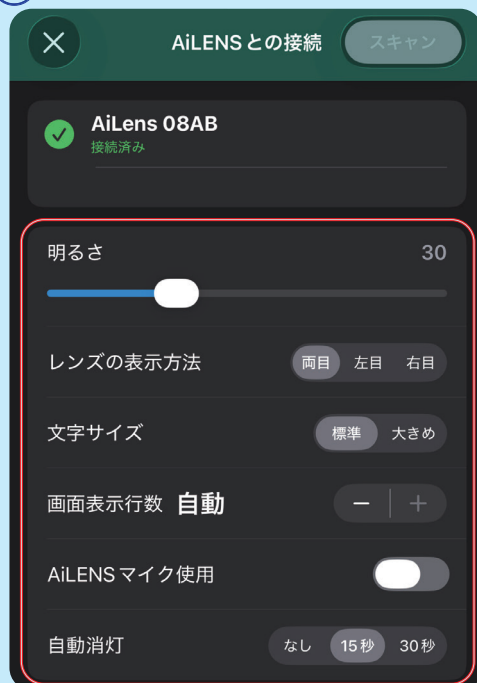

- ・ 明るさ
→ AiLENS に表示される文字の明るさを調整できます
※暗い場所では、明るさを下げると周りから見えにくくなります
- ・ レンズの表示方法
→ 両目 / 左目 / 右目に切り替えできます
- ・ 文字サイズ
→ 標準 / 大きめに切り替えられます
- ・ 画面表示行数
→ - / + で、AiLENS に表示される行数を調整できます
- ・ AiLENS マイク使用
→ AiLENS マイクの使用を選択できます
- ・ 自動消灯
→ 音声認識結果がない場合の消灯時間を設定できます
(なし / 15 秒 / 30 秒)

ポイント

使いやすい設定に
合わせて
調整しましょう！

困ったとき (AiLENS が検出されない)



あわてず、
順番に確認しましょう。

まず確認すること



- ① AiLENS の電源が入っていること



- ② iPhone の Bluetooth がオンになっていること

1. 「設定」アプリを開く
2. 「アプリ」をタップ
3. 「YY 文字起こし」をタップ
4. Bluetooth がオンか確認する



- ③ AiLENS がほかの端末に接続されていないこと

ほかの端末につながっている場合は、先につながっている端末で、AiLENS の Bluetooth ペアリングを解除してください。解除方法は、右側の手順をご確認ください。

解除後、接続したい端末で
もう一度スキャンしてください。

【解除後に行うこと】

- 1) P.8 「AiLENS 接続をオンにする」の⑦～⑨に沿って接続画面を開きます。
- 2) P.9 「AiLENS をスキャンして接続する」の①～⑧に沿って再度接続してください。

Bluetooth のペアリング解除方法

- ① 「設定」アプリを開く



- ② 「Bluetooth」をタップする



- ③ 一覧から「AiLENS」を探す




- ④ デバイス名の右側にある「i」をタップする



- ⑤ 「このデバイスの登録を解除」をタップする




- ⑥ 確認画面でもう一度「デバイスの登録を解除」をタップする

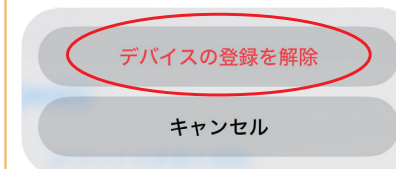

困ったとき (AiLENS と接続できない)

AiLENS と接続ができない場合

〇〇 AiLENS に下記の表示が出た場合は
右の手順で再接続してください。

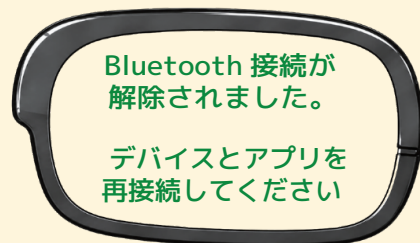

スキャンしても表示されないときは

④でスキャンしても、
一覧に AiLENS が表示されないときは

AiLENS を再起動してください。


それでも表示されない場合は
Bluetooth のペアリングを解除して
再度スキャンしてください。
(P.13 参照)



① YYProbe
アプリを開く



② 「会議を始める」を
タップする

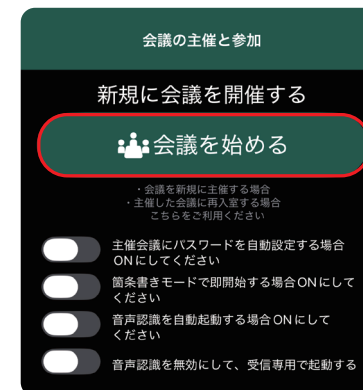

③ 「〇〇」メガネのマーク
をタップする




④ 「接続情報を削除して
再スキャン」をタップ



※Bluetooth 接続が解除され、
自動再接続できない場合に
表示されることがあります。

⑤ 「スキャン」をタップ
※電源が入っている
近くの AiLENS を検出します。

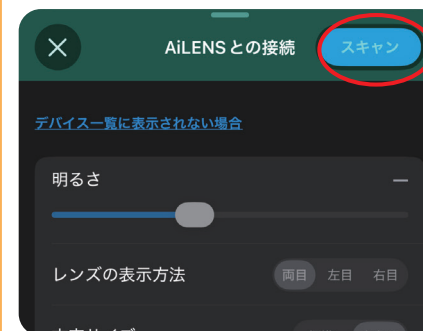

⑥ スキャンして検出された
AiLENS が表示されるので
タップする



この場合は

⑦ もう一度スキャンし、ペアリングをやり直してください。

→ P.9 「AiLENS をスキャンして接続する」の①～⑨ に沿って、再接続してください。




困ったとき (AiLENS に文字が表示されない)

AiLENS に文字が表示されない場合


AiLENS の表示がうまく出ないときや文字が表示されないときは、まずは、YYProbe アプリが最新バージョンか確認してください。

必要な場合は、アプリをアップデートしてください。

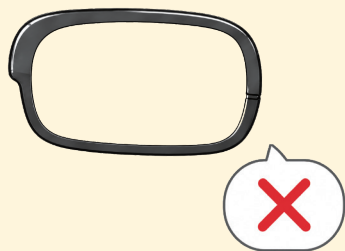


YYProbe アプリを最新バージョンにする手順


- ① App Store を開く

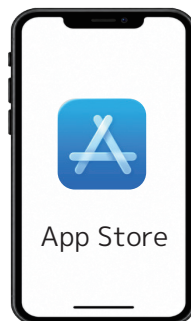


- ② 右上のプロフィールアイコンをタップする

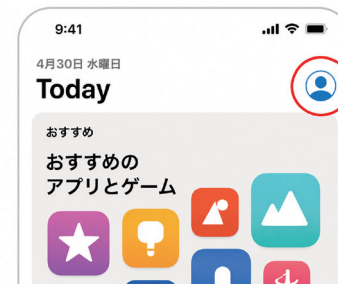

- ③ 「アプリのアップデート」をタップする

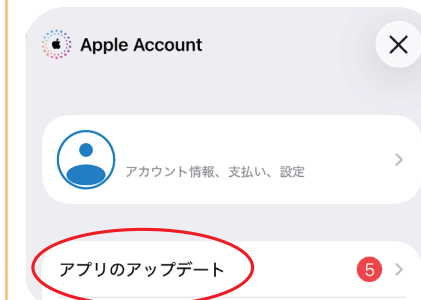

- ④ 一覧の中から「YYProbe」を探す

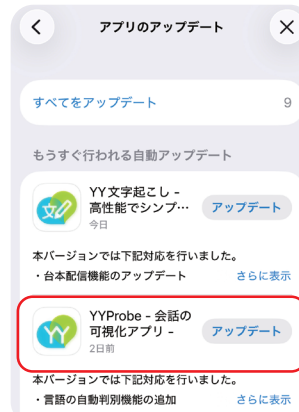

- ⑤ 「アップデート」と表示されていたらタップする



※「開く」と表示されている場合はすでに最新バージョンです

- ⑥ 更新後に「開く」と表示されたら OK です



✓ 更新完了